



科学养生 健康生活

MLX-2399电动按摩刷使用手册

Health electric meridian brush manual

产品简介

感谢您使用魔力星按摩刷，本产品是集生物电，发热，震动，LED红光，等四种功能为一体的多功能家用电动按摩刷。

魔力星按摩刷可以快速疏通身体各部位的淋巴管及经络，软化肌肤，从而起到塑型和美体的效果，刷头凸点与凸点之间形成细小间隔挤压脂肪，打散坚硬脂肪，有效的消除层皮组织，配合适当的力度，搭配适当的精油，可以使人体废物不在淤塞堆积，结合五行学推拿，可以达到事半功倍的效果。

功能介绍

雕塑体形

1.对皮肤及脂肪进行上下刮痧的有氧运动。2.使淋巴功能及血液流通状况增强。3.通过淋巴循环排出废物。4.塑型作用。

祛除寒湿

通过热能效应活化紧张僵硬的肌肉组织，软化肌肤，排出体内寒湿气及多余脂肪，对全身疲劳，腰酸背痛，关节疼有良好的缓解效果。

红光

导致末梢神经兴奋性活动，扩张血流速度，使静脉淤血消除，从而使新陈代谢加快。

生物电

可刺激微循环系统，促使不同层次的肌肉形成被动的有氧运动，锻炼纤维组织，增加肌肤弹性。

产品各部件名称


功能

型号
有效
数据



控制面板

- 震动档位显示
- 温度档位显示 (全部显示)
- 电流档位显示
- 热量调节按键
- 开关键 (长按3秒)
- 震动调节按键
- 生物电调节按键

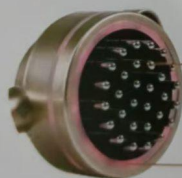

主机底部

- 生物电、发热、按摩头
- LED红光、输出指示灯

最终解释权归魔力星所有

产品参数

品 名:	魔力星电动按摩刷
型 号:	MLX-2399
输入电压:	AC110-240V 50/60Hz
输出电压:	DC9V 2000mA
包装尺寸:	L250*W155*H90mm
本机重量:	约480g
主体材质:	ABS, 铜
包装清单:	机器主机1台(含电源线), 说明书1本
产 地:	中国

作用好处

用于局部: 迅速打散脂肪, 省时省力, 不让美容师搓得气喘吁吁。

用于头部: 改善生发, 防脱发。对于失眠多梦, 记忆力下降, 面色暗黄有缓解效果。

用于足疗: 在手工按摩前刷脚底, 效果比手工按摩好, 且省力, 刷的整条腿发热, 全身通畅。

用于腿部: 淋巴排酸, 雕塑腿形, 消除水肿, 消除腿部赘肉。

用于背部: 可根据本产品文字提示, 可推测出使用者身体健康值。

使用方法

自上而下，先头部、颈、背、腰部或腹部、后四肢，先按摩身体左侧，再按摩身体右侧；

头部：用美体刷从额前到后脑，不必涂刮润滑剂，每个部位疏通30次左右，刮至头部发热感为宜；

颈部：从上向下刷，经常刮拭颈部，具有预防疾病的作用；

背部：自上向下疏通；

胸部：胸部正中线用按摩刷自上而下刷。胸部两侧以身体前正中线任脉为界，分别向左右（先左后右）用刷由内向外沿肋骨走向刮拭，注意避开乳头部位；

腹部：腹部由上向下疏通（有内脏下垂者，应由下向上疏通）亦可用螺旋打圈；

上肢：从上向下疏通；

下肢：由下向上疏通（即向脏方向按摩）；

脚底：从脚跟向脚趾方向按摩。

注意事项

- 1.使用前请先阅读说明书中《注意事项》然后正确使用。
- 2.请按照操作顺序使用仪器。
- 3.请不要自行拆机或改造，维修请咨询维修店，或者买仪器商家。
- 4.请不要用于说明书以外的用途。
- 5.请不要在日晒下、火炉旁、浴室灯高温高湿地方使用或放置。不要放在较热的电器旁边，以免发生火灾、触电等事故。
- 6.电源适配器不要放在湿的情况下使用，以免短路、触电或者起火。
- 7.请不要让小孩或身体活动不自由的人使用，未成年人使用时需要有成年人监督。
- 8.请放在小孩拿不到的地方。
- 9.孕妇、高血压、心脏病灯慢性病人请勿使用本仪器。
- 10.皮肤病或过度敏感的人请勿使用本仪器。